



Bohrsequenzen für BTI Interna® Implantate




☉ Ø4,5 mm Implantate

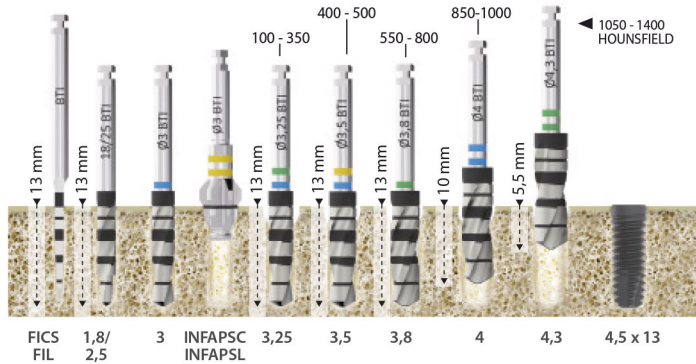


☉ Ø5,0 mm Implantate

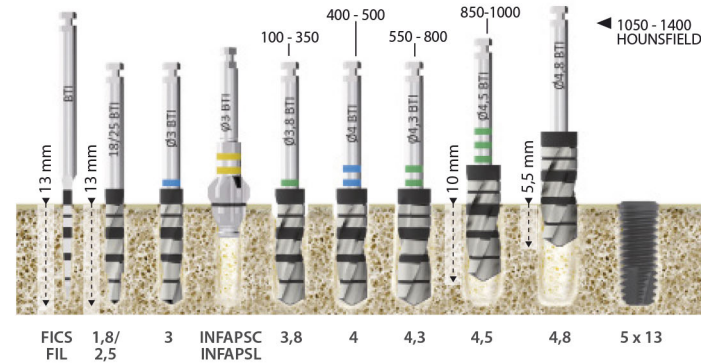

☉ Ø5,5 mm Implantate

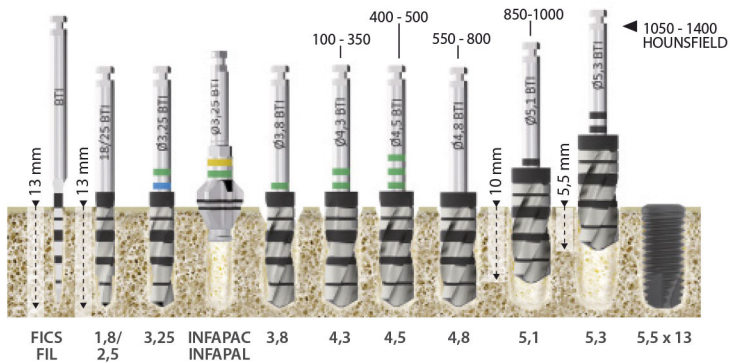


☉ Ø5,5 mm Implantate, extra-kurz

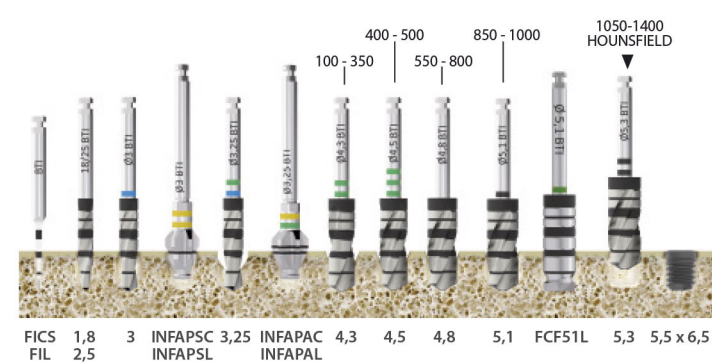

Klasse	Hounsfield
I	1050 - 1400
II	850 - 1000
III	550 - 800
IV	400 - 500
V	100 - 350

POSITIONEN DER LASERMARKIERUNGEN

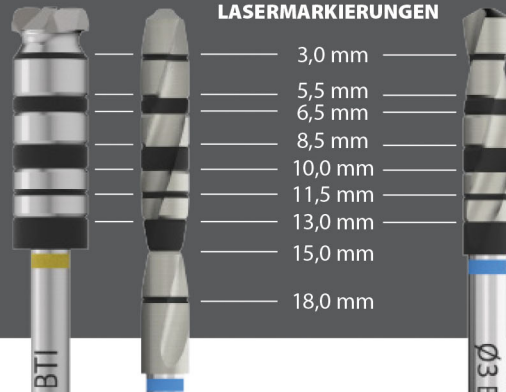

BOHRER	UMDREHUNGSZAHL	KÜHLUNG
Initialbohrer	800 - 1.000 U/min	ja
Spiralbohrer	50 - 75 U/min	nein
Versenker	150 - 200 U/min	nein

