


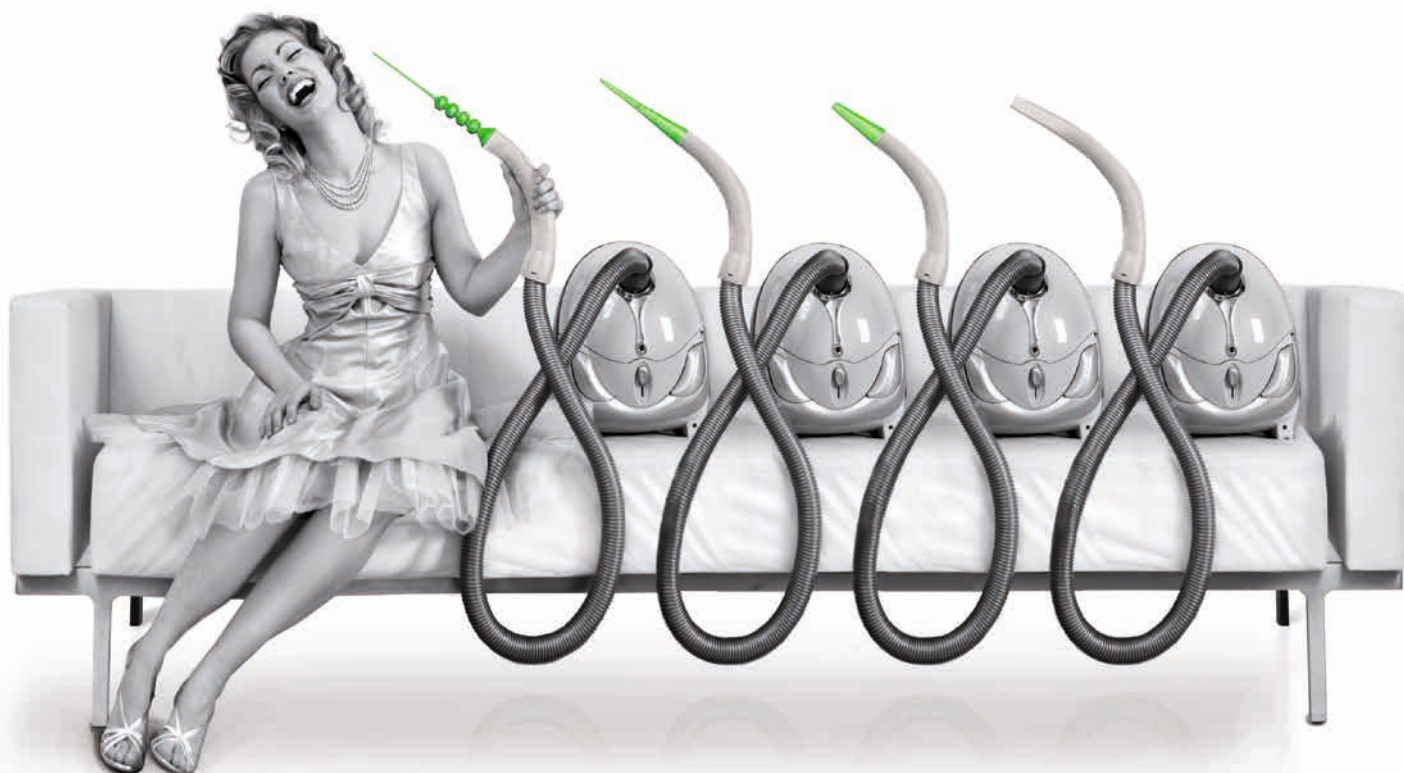


**roeko**

## **Surgitip** ABSAUGKANÜLEN

Die Familie für präzises Absaugen in Chirurgie  
und Endodontie

**COLTENE**

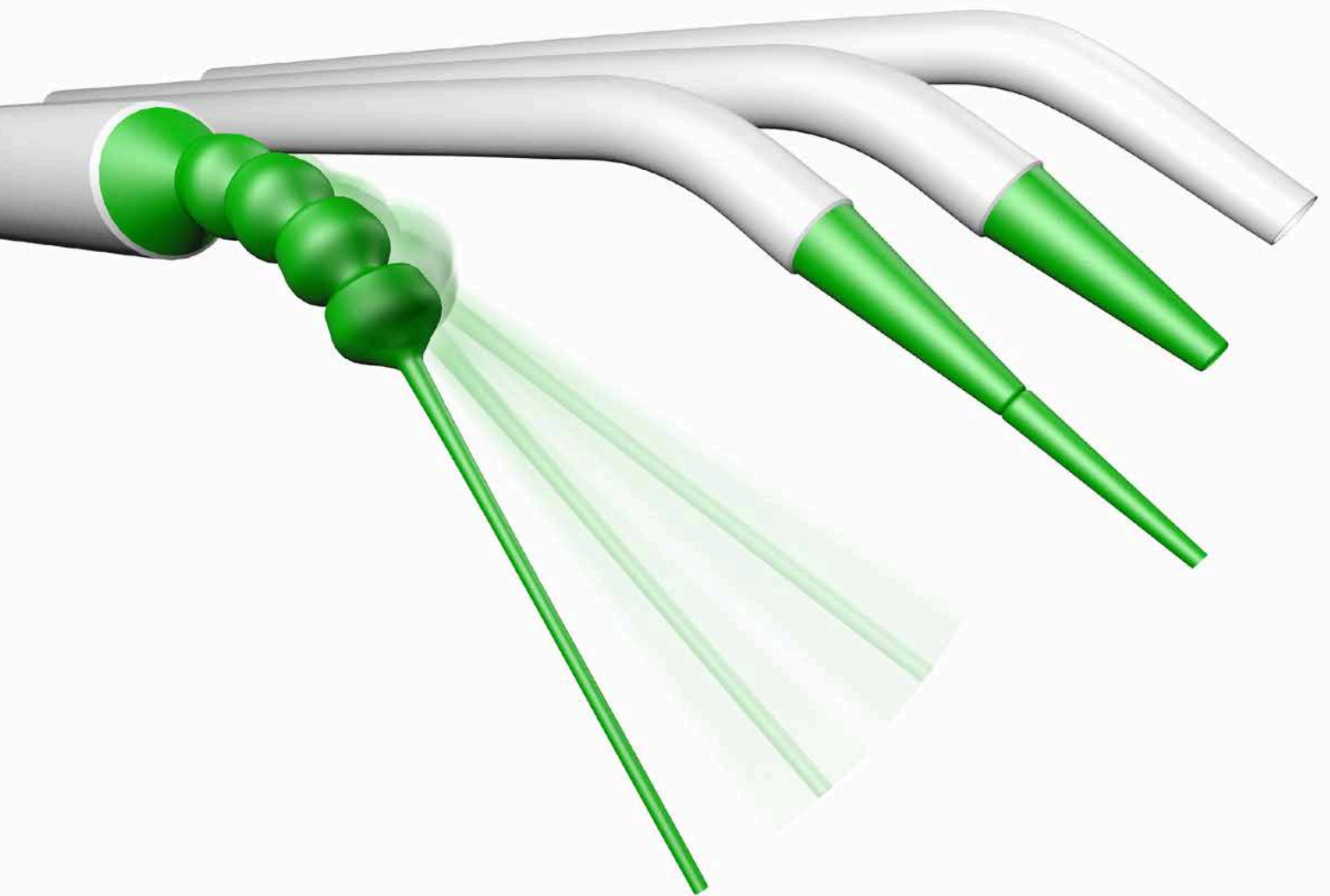

**roeko**

**Surgitip** Surgitip-Absaugkanülen sind bewährte Helfer, um das orale Behandlungsfeld bei minimalinvasiven Eingriffen zu trocknen und Partikel abzusaugen. Die Kunststoffkanülen ermöglichen äußerst präzises Absaugen, denn Form und Design sind speziell für die Arbeit unter Mikroskop oder Lupe entwickelt. Die Kanülen überzeugen zudem durch hygienische und einfache Handhabung.

- Präzises Absaugen durch sich deutlich abhebende grüne Spitze
- Keine Sichtbeeinträchtigung durch schlanke Form und konische Spitze
- Hygienisch und zeitsparend, da steril, einzeln verpackt und sofort einsatzbereit
- Verschiedene Ansaugdurchmesser für ein breites Behandlungsspektrum

## roeko


### Surgitip-endo

Surgitip-endo wurde speziell zur Trocknung des Wurzelkanals entwickelt. Ihr innovatives Kugeldesign verleiht ihr eine dreidimensionale Rundumbeweglichkeit. Diese Flexibilität ermöglicht ein komfortables Einbringen auch in schwer zugängliche Wurzelkanäle, ohne dass hierfür der Canal Tip verbogen werden muss. Dadurch bleibt die Saugleistung uneingeschränkt hoch und die Sicht auf das Behandlungsfeld ungestört.

Surgitip-endo saugt im Wurzelkanal Spüllösungen und Feuchtigkeit schnell und gründlich auf. Der Zeitaufwand zur finalen Trocknung des Kanals wird deutlich verringert. Ebenso die Anzahl der benötigten Papierspitzen. Lediglich zur abschliessenden Trocknungskontrolle wird die Verwendung von Papierspitzen empfohlen.

- Rundum bewegliche Spitze durch innovatives Kugeldesign
- Optimale Saugleistung bei guter Kanalzugänglichkeit
- Canal Tip ISO 60, Innendurchmesser 0,35 mm
- Steril, einzeln verpackt und sofort einsatzbereit


ISO 60

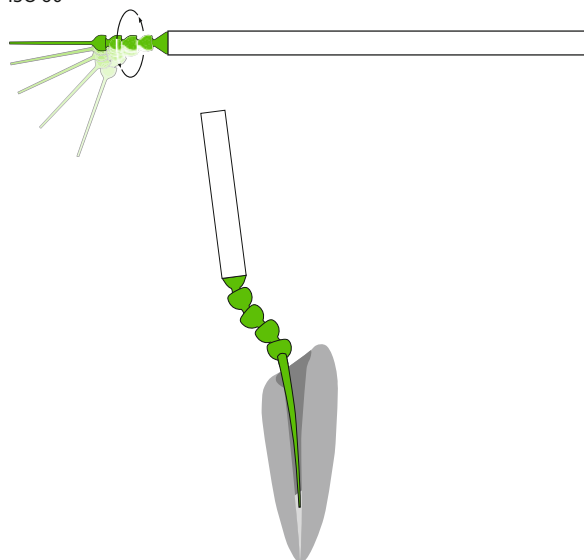

## roeko

### Surgitip-micro



Surgitip-micro bietet mit ihrer Ansaugöffnung von 1,2 mm bei mikrochirurgischen Eingriffen Saugleistung und Präzision. Die Kanüle liegt gut in der Hand, lässt sich leicht führen, so dass ein gezieltes Absaugen auch im engen dentalen Operationsumfeld gut möglich ist. Surgitip-micro ist steril, einzeln verpackt und sofort einsatzbereit.

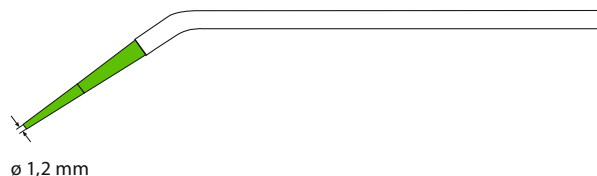

## roeko

### Surgitip

Surgitip kommt bei chirurgischen Eingriffen zum Einsatz, die eine größere Saugleistung erfordern. Sie ist mit einer Ansaugöffnung von 2,5 mm und 4,8 mm erhältlich. Die 4,8 mm Kanüle besteht aus dem gebogenen Kanülenrohr ohne grüne Spitze. Surgitip ist steril, einzeln verpackt und sofort einsatzbereit.

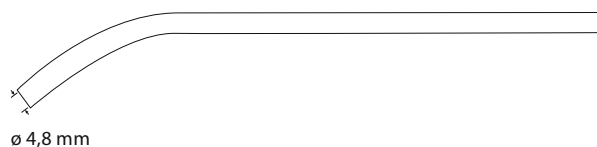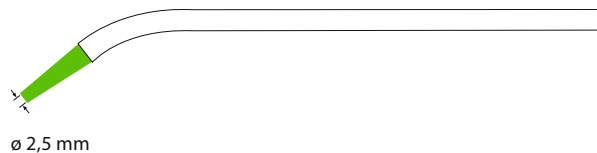

## roeko

### Absaugkanülen

Die unsterilen Kunststoffkanülen eignen sich zum Absaugen bei nicht chirurgischen Eingriffen. Sie entsprechen in Form und Länge der sterilen Surgitip 4,8 mm. Die Absaugkanülen sind lose im Beutel à 100 Stück erhältlich.


## roeko

### Doppeladapter

Mit dem Doppeladapter kann jede ROEKO Absaugkanüle an die gängigen Absauganlagen mit ø 11 oder ø 16 mm Anschlussöffnung angeschlossen werden. Der Doppeladapter ist wiederverwendbar und bei bis zu 134°C im Autoklav und Chemiklav sterilisierbar.

ø 11 mm


ø 16 mm

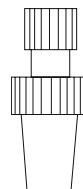

## roeko

### Concorde II

Für die Universalabsaugung empfehlen wir die Concorde II. Mit der Kunststoffkanüle lassen sich Zunge und Wangen sanft abhalten und hohe Volumina absaugen. Die aus hochwertigem Kunststoff gefertigte Kanüle ist wiederverwendbar und bei bis zu 134°C im Autoklav und Chemiklav sterilisierbar.

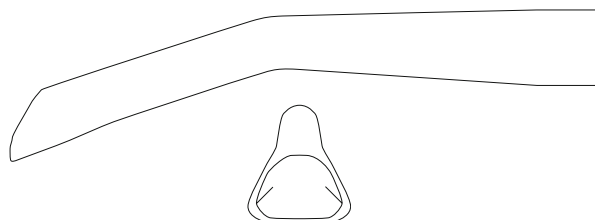

## BESTELLINFORMATIONEN

|                       | ø Ansaugöffnung | ø Anschlussöffnung | Inhalt                 | REF                |
|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Surgitip-endo</b>  | 0,35 mm         | 6,5 mm             | 20 St. *               | 6001 8280          |
| <b>Surgitip-micro</b> | 1,2 mm          | 6,5 mm             | 20 St. *<br>100 St. ** | 462 012<br>462 013 |
| <b>Surgitip</b>       | 2,5 mm          | 6,5 mm             | 20 St. *<br>100 St. ** | 462 025<br>462 026 |
|                       | 4,8 mm          | 6,5 mm             | 20 St. *<br>100 St. ** | 462 048<br>462 049 |
| <b>Absaugkanülen</b>  | 4,8 mm          | 6,5 mm             | 100 St. *              | 461 048            |
| <b>Concorde</b>       |                 | 11 mm<br>16 mm     | 10 St. ***<br>10 St.   | 450 211<br>450 216 |
| <b>Adapter</b>        |                 | 11 mm<br>16 mm     | 1<br>1                 | 463 025<br>463 011 |
| <b>Doppeladapter</b>  |                 | 11 + 16 mm         | 1 Set                  | 463 000            |

\* inkl. 1 Doppeladapter | \*\* inkl. 5 Doppeladapter | \*\*\* inkl. 1 Adapter



© COLTENE – www.coltene.com

**Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG**  
Raiffeisenstraße 30  
89129 Langenau / Germany  
T +49 7345 805 0  
F +49 7345 805 201  
info.de@coltene.com

**Coltène/Whaledent AG**  
Feldwiesenstr. 20  
9450 Altstätten/Switzerland  
T + 41 71 757 53 00  
F + 41 71 757 53 01  
info.ch@coltene.com

**Coltène/Whaledent Inc.**  
235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA  
T + 1 330 916 8800  
F + 1 330 916 7077  
info.us@coltene.com

**COLTENE**