


voco

HIGHLIGHTS

High-Performance-Composite
GrandioSO Unlimited –
4 mm Universal-Composite in
fünf Cluster-Shades

Vital und alltagstauglich
Vitalerhaltung und Überkappung
der Pulpa mit dem Biomaterial
MTA vpt (Vitale Pulpa Therapie)

Geschmackvoll
Profluorid Varnish + BioMin
mit Bioglas ist die neue Kraft
zur Zahnschmelzhärtung

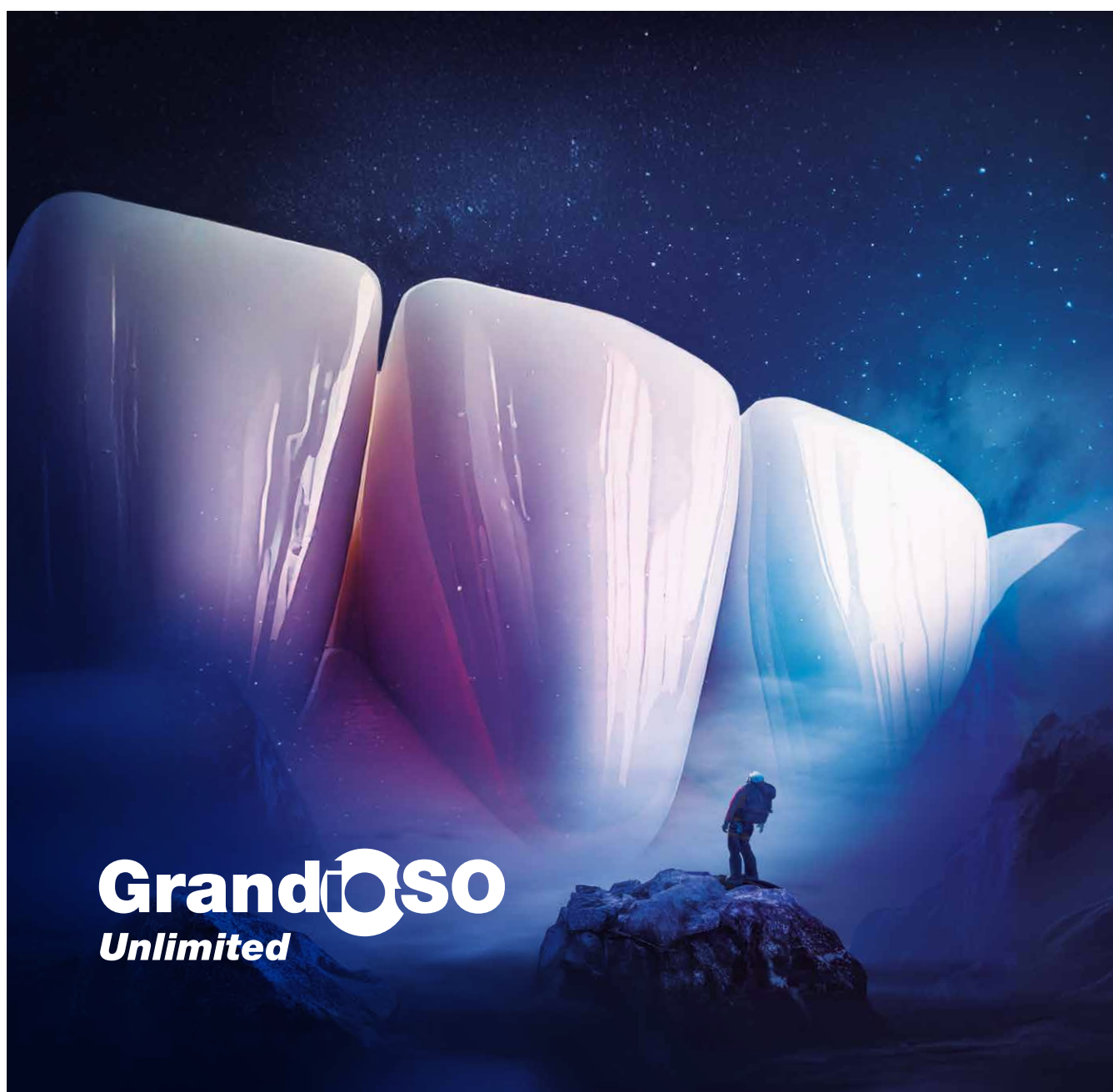

GrandioSO Unlimited

4 mm Universal-Composite in fünf Cluster-Shades

Während ästhetische Universal-Composites aufwendig in 2 mm Inkrementen geschichtet und polymerisiert werden müssen, bieten Bulk-Fill-Composites den Vorteil, Inkremente bis 4 mm an einem Stück in die Kavität zu applizieren. Allerdings werden Bulk-Fill-Composites aufgrund einer häufig unzureichenden Ästhetik nur für den Seitenzahnbereich eingesetzt. Diese Einschränkung löst VOCO mit GrandioSO Unlimited nun auf. Das ästhetische Material kann in Inkrementen bis 4 mm in die Kavität appliziert werden und ist sowohl für den Front- als auch Seitenzahnbereich indiziert. Sie benötigen also nur noch ein stopfbares Universal-Composite!

Cluster-Shade-System

Darüber hinaus sind Sie mit nur 5 vorzuhaltenden Farben für Ihren Praxisalltag optimal aufgestellt und können Ihr Warenlager deutlich verschlanken. Denn dank des vereinfachten Farbsystems lassen sich mit nur 5 Cluster-Shades alle 16 VITA® classical Farben abdecken:

GrandioSO Unlimited	A1				A2		A3			A3.5				A4		
VITA® classical	A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4

High-Performance-Composite

Mit einem Füllstoffgehalt von imposanten 91 Gew.-% setzt GrandioSO Unlimited zudem neue Maßstäbe in puncto Stabilität und Festigkeit. Auch der niedrige Volumenschumpf von 1,44 % reduziert die Gefahr von Randspaltbildung und Randverfärbungen und trägt zu den qualitativ hochwertigsten Füllungen bei.



Testpackung

10 × 0,3 g Caps
(je 2 × A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ 10 × Futurabond U SingleDose,
+ Farbkarte

REF 6257



Spritzen Set

5 × 4,5 g Spritze
(A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ Farbkarte

REF 6258

Caps Set

75 × 0,3 g Caps
(je 15 × A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ Farbkarte

REF 6270

Weitere Handelsformen und Einzelfarben finden Sie unter www.voco.dental

Das High-Performance-Composite

Universell
Für Front- & Seitenzahnbereich

Höchste Stabilität und Festigkeit
91 Gew.-% Füllstoffgehalt

5 Cluster-Shades
Decken alle 16 VITA®-Farben ab

Kein Schichten
Bis 4 mm Inkrementstärke


Exzellente Ästhetik
Hervorragende Polierbarkeit

MTA vpt

Vitalerhaltung der Pulpa für die tägliche Praxis –
biokompatibel und frei von Monomeren

Zur Vitalerhaltung der Pulpa ist ein biokompatibler, stabiler und bakterienichtiger Pulpenschutz essentiell. Mit MTA vpt bietet VOCO ein Mineral Trioxid Aggregat (MTA) Material an, das genau für diesen Zweck ausgelegt ist. Innerhalb der Vitalen Pulpa Therapie (VPT) kann MTA vpt für Unterfüllungen, indirekte und direkte Überkappungen sowie für die Versorgung der Pulpa nach einer Vital-Amputation (partielle oder vollständige Pulpotomie) eingesetzt werden. Auch im Rahmen des Kariesmanagements lässt sich kariöses Restdentin mit MTA vpt verlässlich abdecken.

MTA vpt setzt beim Abbinden Kalzium- und Hydroxidionen frei, was körpereigene, regenerative Prozesse und die Bildung von Tertiärdentin stimuliert. Der dabei entstehende hohe pH-Wert ist für seine bakterio-statische Wirkung bekannt und unterstützt die Remineralisierung. Auf diese Weise schafft MTA vpt eine stabile und bakterien-dichte Schutzbarriere – die optimale Grundlage zur Vitalerhaltung der Pulpa.

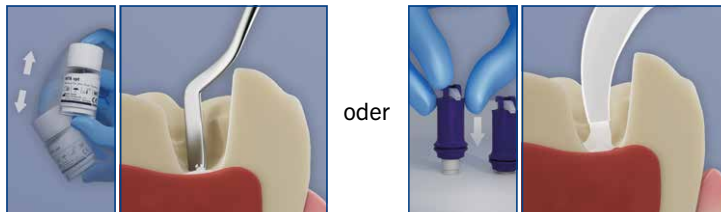

- **Zuverlässig:** mineralisiert zu einer bakterien-dichten Versiegelung
- **Zeiteffizient:** sofortige Weiterverarbeitung durch druckloses Überschichten
- **Praktikabel:** für Kariesmanagement und Vitale Pulpa Therapie einsetzbar



MTA vpt
Handmisch
10 g Pulver + 10 ml Flüssigkeit
REF 1645



MTA vpt AC
25 Stk. Applikationskapseln
REF 1646



Fluoreszenz, die nichts übersieht: e

Bifix Temp fluorescent

Dualhärtendes, temporäres
Befestigungsmaterial auf Composite-Basis

5 ml QuickMix Spritze
+ Zubehör
REF 1056



Fluoreszierendes Befestigungsmaterial


Handstück, Ladestation,
Netzteil, 2 Akkus,
Blendschutz, Schutzfolien,
Schutzbrille
REF 9070



AlignerFlow LC

Fluoreszierendes Composite
für Aligner Attachments

2 x 2 g Spritze A1 REF 1526
2 x 2 g Spritze A2 REF 1527
2 x 2 g Spritze A3 REF 1528

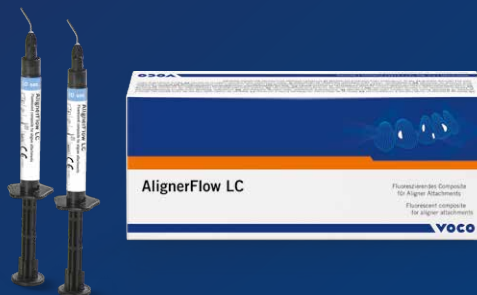

Fluoreszierendes Composite für Attachments

CURE & CHECK

TwinWave

- Leistungsstark: Modernste LED-Technologie mit hoher Leistung von 1.300 mW
- Leichtes und handliches Design
- Einfache Handhabung: Modulare Bauweise kann über praktischen Drehschalter umgeschaltet werden
- Kontinuierlich einsatzbereit: Mehrere Moduli

erkennt Rückstände, spart Zeit, schafft Sicherheit



Die smarte
und leistungsstarke
2-in-1 Lampe
für Lichtpolymerisation und
Fluoreszenzdetektion

ave

NEU

D-Technologie
mW/cm²
gn: Metallgehäuse, Gesamtgewicht nur 75 g
s (Lichtpolymerisation, Fluoreszenzdetektion)
chalter ausgewählt werden
Mitgelieferter Ersatzakku

Fluoreszierendes Stumpfaufbaumaterial
Fluoreszierendes Füllungsmaterial für Provisorien

Rebilda DC fluorescent

Das erste Stumpfaufbau- und Wurzelstiftbefestigungssystem
mit aktivierbarer Fluoreszenz

50 g Kartusche,
fluoreszierend dentin,
+ Zubehör

REF 1399

10 g QuickMix Spritze
fluoreszierend dentin,
+ Zubehör

REF 1406



Clip F fluorescent

Lichthärtendes Füllungsmaterial
für temporäre Versorgungen

2 x 4 g Spritze

REF 1288



Profluorid Varnish + BioMin

Härtet signifikant den geschwächten Zahnschmelz –
in vier angenehmen Geschmacksrichtungen

Der erfolgreiche Fluoridlack VOCO Profluorid Varnish erhält den Zusatz des Bioglasses von BioMin. Dieses nicht sichtbare Bioglas löst sich im Speichel und setzt Calcium- und Phosphationen frei, die die Remineralisierung des Zahns unterstützen. Zusammen mit dem Fluorid aus dem Varnish bilden sich auf der Zahnoberfläche kristalline Strukturen aus, die u.a. einen säuregeschwächten Zahnschmelz signifikant härten.

Zusammen mit der bekannten Desensibilisierung ein echter Doppelschutz!



200 × 0,40 ml SingleDose

Karamell REF 2276
Kirsche REF 2277
Minze REF 2278
Bubble Gum REF 2279

50 × 0,40 ml SingleDose

Karamell REF 2270
Kirsche REF 2271
Minze REF 2272
Bubble Gum REF 2273

10 ml Tube

Karamell REF 2266
Kirsche REF 2267
Minze REF 2268
Bubble Gum REF 2269

Mixed Flavour

48 × 0,40 ml SingleDose
sortiert: Karamell, Kirsche,
Minze, Bubble Gum
REF 2274



Profluorid Varnish

Fluoridhaltiger Lack zur Zahndesensibilisierung (5 % NaF)

Die Ursache für Hypersensibilität sind in aller Regel offene Dentintubuli. Daher ist es Ziel der Behandlung, diese langfristig zu verschließen. Profluorid Varnish ist ein fluoridhaltiger Lack, der nach Kavitätenpräparationen oder bei empfindlichen Zahnhälsen die freiliegenden Dentintubuli effektiv versiegelt.

Die Vorteile auf einen Blick

- Schnelle Desensibilisierung und Fluoridabgabe (22.600 ppm Fluorid)
- Einfaches Auftragen – feuchtigkeitstolerant
- In sieben angenehmen Geschmacksrichtungen erhältlich
- Dünn aufzutragen und dadurch ergiebig



5 × 1,70 ml Ampulle

Melone REF 2235

Mixed Flavour

4 × 10 ml Tube
sortiert: Minze, Melone,
Kirsche und Karamell
REF 2971

10 ml Tube

Melone REF 1267 Karamell REF 2232
Minze REF 2234 Kirsche REF 2233
Pina Colada REF 2237 Cola Lime REF 2236

200 × 0,40 ml SingleDose

Melone REF 1271 Bubble Gum REF 2239
Minze REF 2231 Kirsche REF 2230
Pina Colada REF 2243 Cola Lime REF 2241
Karamell REF 2229

Futurabond U

In der praktischen *SingleDose*

Hinter Futurabond U liegt ein langer Entwicklungsprozess, der eines zum Ziel hatte: ein Universal-Adhäsiv anzubieten, das dem Anwender ausschließlich Vorteile sowie Verlässlichkeit bietet und jedes weitere Adhäsivsystem in der Praxis überflüssig macht.

Futurabond U setzt deshalb neue Maßstäbe hinsichtlich seiner Haftwerte und vor allem bei seiner flexiblen sowie vielseitigen Einsetzbarkeit.

50 *SingleDose*

50 × Futurabond U
+ Zubehör

REF 1571

200 *SingleDose*

200 × Futurabond U
+ Zubehör

REF 1572

Beim Kauf
12%*
sparen!



Grandio blocs & Grandio disc

Das nanokeramische Hybrid CAD/CAM-Material
für permanente Einzelzahn-Restorationen oder Gerüstverblendungen

Grandio blocs/Grandio disc überzeugen mit ihren physikalischen Eigenschaften hinsichtlich Elastizität, Festigkeit und einem hohen Füllstoffgehalt von 86 Gew.-%. Daher kommt das Material dem natürlichen Zahn näher als alle anderen Materialien für die indirekte Restauration. Grandio blocs/disc ist das Material der Wahl und herkömmlichen Restaurationsmaterialien überlegen. Die Produkte können problemlos intraoral bearbeitet und auf Hochglanz poliert werden.



Erhältlich in
12 mm, 15 mm
und 18 mm

Grandio disc multicolor

1 × 15 mm (ø 98 mm)
zum Beispiel:

A2 REF 6217
A3 REF 6218

Weitere Handelsformen und Einzelfarben
finden Sie unter www.voco.dental



Quelle: Dr. Felipe Moura, Brasilien



Auch
für Planmil®
erhältlich

Grandio blocs


5 × Gr. 12 LT/HT
REF siehe Tabelle

Grandio blocs

5 × Gr. 14L LT/HT
REF siehe Tabelle

	Für den Frontzahnbereich							Für den Seitenzahnbereich			
	A1 LT	A2 LT	A3 LT	A3.5 LT	B1 LT	C2 LT	BL LT	A1 HT	A2 HT	A3 HT	A3.5 HT
Gr. 12	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6012	6013	6014	6015
Gr. 14L	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024	6027	6028	6029	6030

Bifix Veneer LC

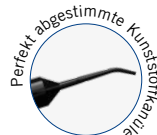

Einfach sicher, einfach ästhetisch – Veneerbefestigung mit optimiertem Workflow


Das besonders ästhetische und mit 81 Gew.-% gefüllte lichthärtende Nano-Hybrid-Befestigungscomposite Bifix Veneer LC wurde speziell für die einfache und sichere adhäsive Befestigung von lichtdurchlässigen Veneers, Inlays und Onlays aus Composite oder Keramik entwickelt.

Das übersichtliche Farbkonzept mit den **drei Farben bright, clear und warm** macht das Einsetzen von Veneers effizient und ermöglicht eine positive Beeinflussung des ästhetischen Ergebnisses. Dank der exakt abgestimmten Try-In Pasten lässt sich die passende Farbe einfach auswählen und das finale Ergebnis kann vorab überprüft werden.

Ein intuitives und effizientes Farbkonzept für maximal ästhetischen Erfolg



Quelle: Prof. Carlos Torres, Brasilien

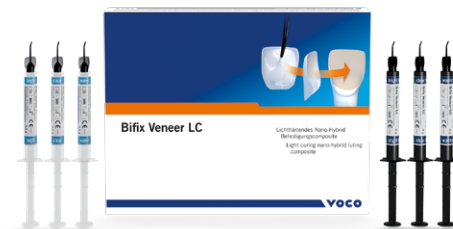

Bifix Veneer Set

- 3 × 2 g Spritze Bifix Veneer LC
 - 3 × 2,5 g Spritze Bifix Veneer Try-In (bright, clear, warm)
 - + Zubehör
- REF 1428**



Bifix Veneer System-Set

- 3 × 2 g Spritze Bifix Veneer LC
 - 3 × 2,5 g Spritze Bifix Veneer Try-In (bright, clear, warm)
 - 2 ml Spritze Vococid
 - 20 Stk. SingleDose Futurabond U
 - 20 Stk. SingleDose Ceramic Bond
 - 10 Stk. Sticky Tim
 - + Zubehör
- REF 1429**

Weitere Handelsformen und Einzelfarben finden Sie unter www.voco.dental

Zur Bestellung der gezeigten VOCO Highlights sprechen Sie bitte Ihr Dentaldepot oder Ihren VOCO-Außendienstmitarbeitenden an.

*gegenüber Einzelkauf

Angebote sind nur bei teilnehmenden Handelspartnern gültig. Sonderpreise Ihres Depots werden in jedem Fall berücksichtigt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Deutschland

VOCO-Kundenservice
Freecall: 00 800 44 444 555
Fax: +49 4721-719-2931
service@voco.de



[voco.dental](http://www.voco.dental)